



EO-70

Coaching-funksjonen



Brukerhåndbok

Aktivere coaching-funksjonen

Brukeren kan bytte til coaching-skjermen for å utføre en behandling som tidligere er lagret som forhåndsinnstilt av kliniker.


MERKNAD:	Coaching-funksjonen er kun tilgjengelig for forhåndsinnstilling med behandling i INEX-Auto-modus eller i IPPB-modus.
-----------------	--

Fra startskjermen klikker du på  for å vise coaching-funksjonsskjermen.

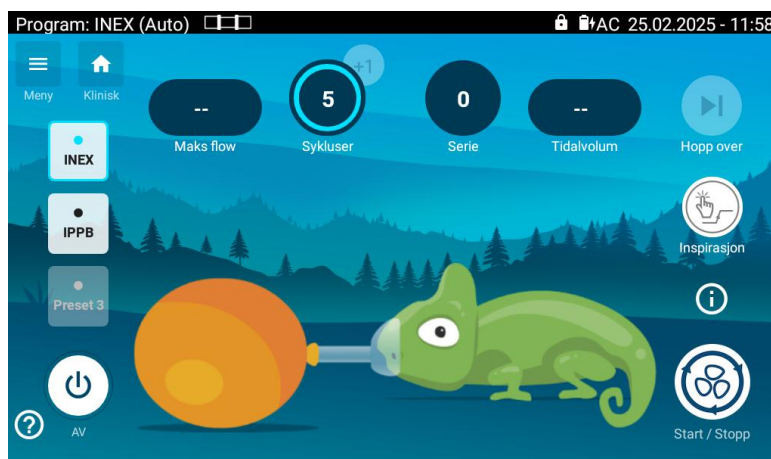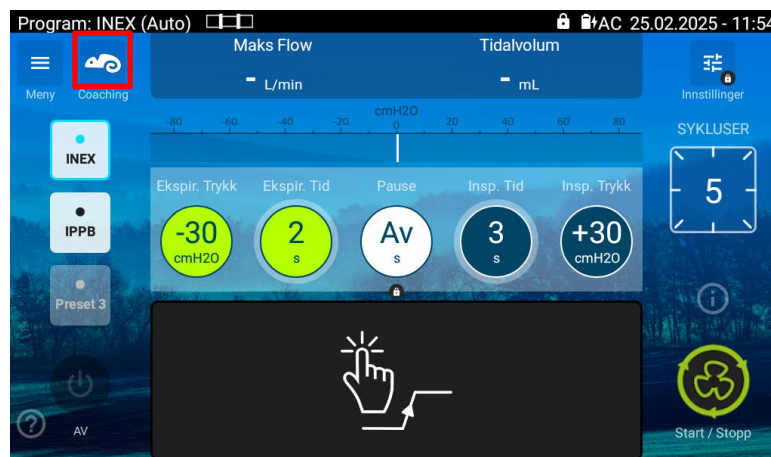

MERKNAD:	Coaching-funksjonen er ikke tilgjengelig for alle behandlingsmoduser. En melding vil indikere om noe mangler for å starte funksjonen.
	Hvis skjermen indikerer at ingen kompatibel forhåndsinnstilling er tilgjengelig, kontakter du tjenesteleverandøren.


Endre forhåndsinnstilt modus fra coaching-skjermen

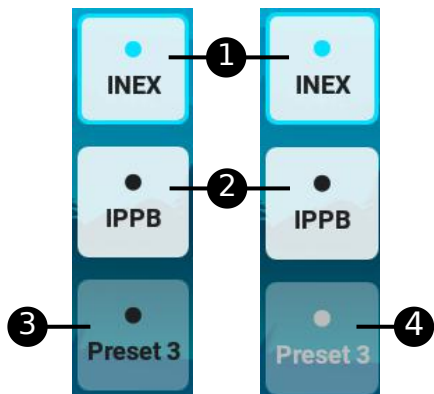

1. Gjeldende forhåndsinnstilling/aktivert forhåndsinnstilling
2. Tilgjengelig forhåndsinnstilling
3. Inaktiv forhåndsinnstilling (ikke tilgjengelig for coaching)
4. Tom forhåndsinnstilling

For å endre forhåndsinnstillingen, klikk på forhåndsinnstillingen du vil slå på. Pågår behandlingen er det ikke mulig å endre forhåndsinnstillingen.

INEX coaching-skjermen

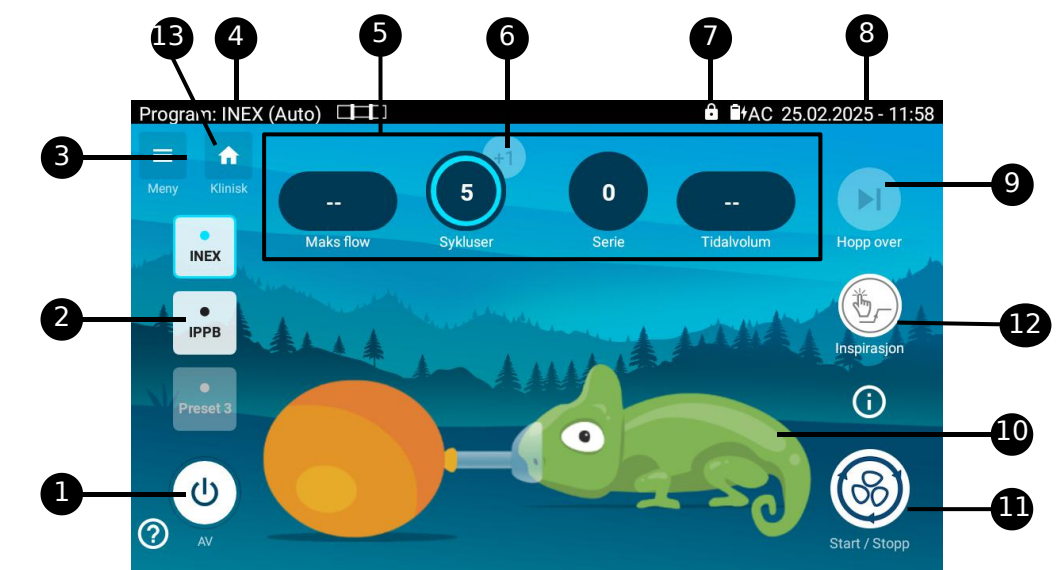


1. Av-knapp 2. Meny for forhåndsinnstilt modus (1-3): Forhåndsinnstillinger installert av kliniker og tilgjengelig for pasienten ved behov. 3. Meny: Gir tilgang til pasientskjerm og kliniske menyer 4. Indikator for behandlingsprogram: INEX (manuell/auto) eller IPPB 5. Behandlingsmonitorering: viser sanntidsverdier under behandlingen 6. Knapp for tilleggssyklus: tillater å legge til en syklus i den pågående behandlingen om nødvendig	7. Batteriindikator: Indikerer nivået som er igjen i batteriet eller om batteriet lades. 8. Dato: indikerer datoen i ÅÅÅ/MM/DD-format. Tid: Indikerer klokkeslettet på 24-timersklokke. Dette kan settes opp og endres fra Innstillinger-menyen (Preferences). 9. Hopp over-knapp: lar deg stoppe den pågående INEX-serien. 10. Kameleon: Animasjon som følger konfigurert behandling for å hjelpe pasienten 11. Start/stopp-knapp: starter eller stopper behandlingen. 12. Utløs en inspirasjon under behandlingen 13. Snarvei til klinisk skjerm
--	--


Utføre en INEX-behandling med coaching-funksjon

Velg en forhåndsinnstilling med en INEX Auto-behandling, og start behandlingen. Animasjonen vil følge behandlingsfasene:

Under inspirasjon blåses kameleonen opp, ballongen tømmes

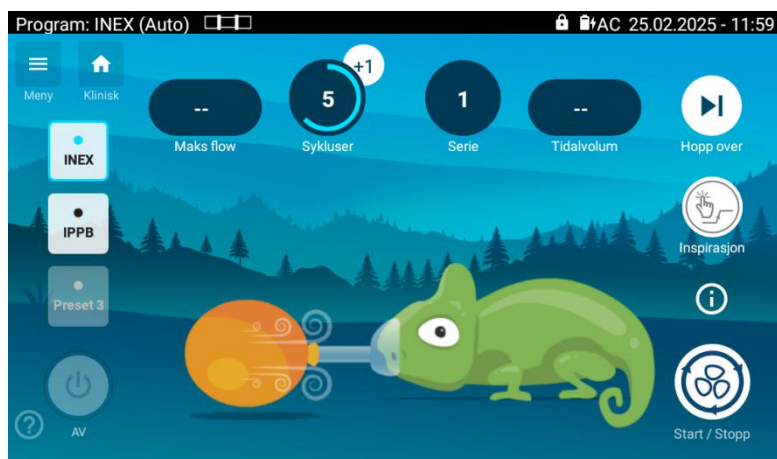

Under ekspirasjon tømmes kameleonen, ballongen blåses opp

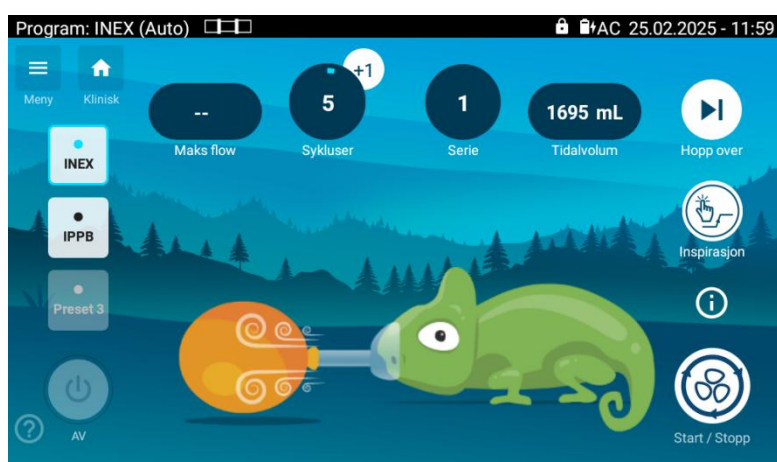

Under pause beveger verken kameleon eller ballong seg.

Overvåking:


Maks gjennomstrømning oppdateres etter hver ekspirasjon

Syklustelleren reduseres etter hver ekspirasjon. Den kan økes med «+1»-knappen under siste syklus

Serietelleren økes ved hver behandlingsstart. Den tilbakestilles når du endrer forhåndsinnstilling eller slår av enheten


Tidalvolumet oppdateres etter hver inspirasjon

Når serien er fullført, eller behandlingen stoppes med **hopp over-knappen**, vises en popup-melding som spør pasienten om de ønsker å starte en ny serie.

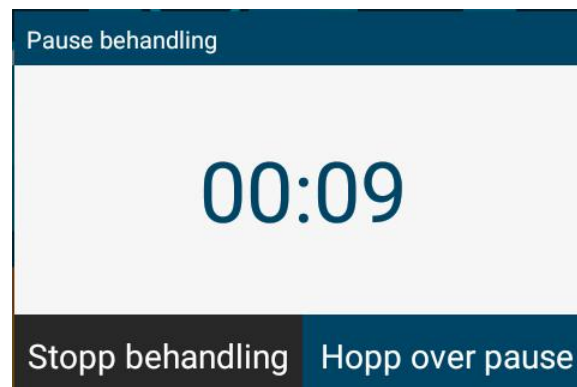

Stoppeklokken er kun veiledende. Klikk på "**Hopp over pause**" for å starte serien på nytt, eller trykk på "**Stopp behandling**" for å avslutte behandlingen..

IPPB coaching-skjermen

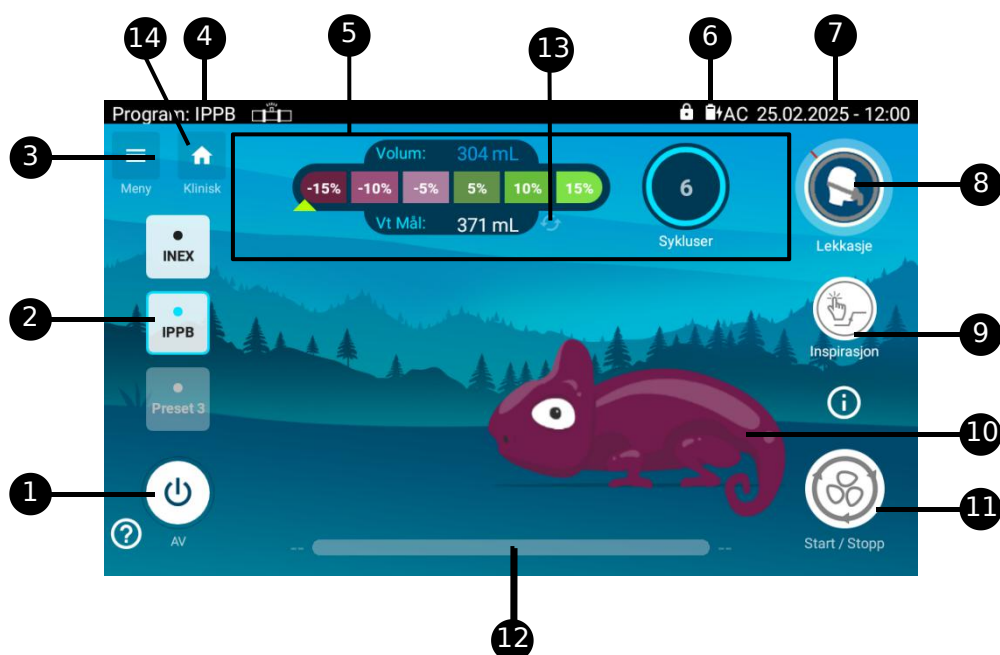

- | | |
|---|--|
| 1. Av-knapp | 8. Lekkasjeindikator |
| 2. Meny for forhåndsinnstilt modus (1-3): Forhåndsinnstillinger installert av klinikerer og tilgjengelig for pasienten ved behov. | 9. Utløserknapp: tillat å utløse en inspirasjon manuelt under en behandling |
| 3. Meny: Gir tilgang til pasientskjerm og kliniske menyer | 10. Kameleon: Animasjon som vil følge behandlingen som er konfigurert for å hjelpe pasienten |
| 4. Indikator for behandlingsprogram: INEX (manuell/auto) eller IPPB | 11. Start/stopp-knapp: starter eller stopper behandlingen. |
| 5. Behandlingsmonitorering: viser sanntidsverdier under behandlingen | 12. Behandlingstidslinje: Viser hvor lang tid som har passert og hvor mye behandlingstid som gjenstår, dersom dette er angitt av klinikerer |
| 6. Batteriindikator??? | 13. Tilbakestilling av målvolumet |
| 7. Dato og klokkeslett med formatet ÅÅÅÅ/MM/DD (kan endres i innstillingsmenyen) | 14. Snarvei til klinisk skjerm |

Utføre en IPPB-behandling med coaching-funksjon

Velg en forhåndsinnstilling med IPPB-behandling, og start behandlingen. Etter konfigurasjon av behandlingen kan inspirasjon utløses av pasienten, eller ved å bruke utløserknappen.

Volum viser sanntidsutviklingen av volumet under inspirasjonen. Denne overvåkingen er aktiv til det endelige inspirasjonsvolumet for neste inspirasjon. Respirasjonstelleren økes i begynnelsen av hver inspirasjon. På slutten av hver inspirasjon evalueres pasienttilkoblingslekkasjene, og lekkasjeindikatoren 

blir grønn eller oransje. Oransje indikerer for stor lekkasje ved pasienttilkoblingen og at justering er nødvendig.

Under inspirasjon vil kameleonen blåses gradvis opp i takt med hvor mye av målvolumet som er nådd. Når målvolumet er oppnådd eller overskredet, blir den grønn..

Under de 3 første inspirasjonene:

Kameleonen beveger seg ikke

V-målet forblir udefinert

Etter 3 inspirasjoner:

V-målet beregnes som gjennomsnittet av volumet fra de tre første inspirasjonene. Dette volumet forblir uendret gjennom resten av behandlingen. Under ekspirasjon tømmes kameleonen gradvis til den når den opprinnelige posisjon og farge. Den forblir slik til neste inspirasjon starter. Pilen for volumstolpediagrammet beveger seg i takt med hvor stor andel av målvolumet som er oppnådd. Den forblir på høyest nådd nivå til neste inspirasjon.

